


良質な心電図波形が得られる、ブルーセンサーの特徴！

ノイズを軽減するオフセット構造

オフセット構造ではセンサー部が接着され、コネクタが独立しているため、リード線やコネクタに揺れが生じてセンサーには影響しないので、ノイズが発生し難くなっています。

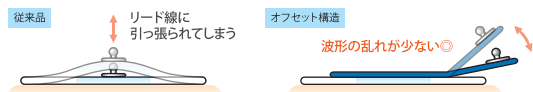

皮膚抵抗を最小限にするウェットゲル


ウェットゲルは皮膚表面全体に三次元的に密着するので、大きな接触面積を得ることができます。また、皮膚に湿潤性を持たせるので速やかに皮膚抵抗を低下させます。



銀/塩化銀の高性能なセンサー

純銀のテープに銀/塩化銀の加工が施された高性能なセンサーを使用。

● 用途に合わせて、様々なタイプからお選びいただけます

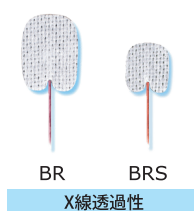

標準十二誘導心電図検査に、
ディスポーザブル **タブ電極** をおすすめします！

単回使用で衛生的

感染のリスクを低減



良質な波形がとれるウェットゲル
接着面積が広く、素早くしっかりと接着
付け外しが簡単なフィッティングコネクタ



肌にやさしい全面導電性ソリッドゲル
小型 (34×23mm) で使いやすい

【ブルーセンサー】医療機器届出番号：13B2X00117000001

【ブルーセンサータブ (BS-TAB)】医療機器届出番号：13B2X00117000020

ディスポーザブル筋電図電極

ニューロライン

ディスポーザブル筋電図用表面電極 ニューロライン

- 高品質な銀 / 塩化銀センサー
- 肌にやさしい全面導電性ソリッドゲル
- 柔軟なバック材でしっかりフィット
- 脱落しずらく、長時間のモニタリングに適しています
- 見分けやすい3色のカラーリード線
- 6mm×9mmの極小純銀センサーによる良質な波形
- 肌にやさしい導電性ソリッドゲル
- クリアバック材でターゲットエリアに正確に貼れます

顔面使用
OK!



医療機器届出番号：13B2X00117000004

ディスポーザブル筋電図用針電極 ニューロライン筋電図用針電極

- 針表面に施したシリコンコーティングと超鋭利な針先でなめらかに挿入！
- 強く柔軟性のある針でターゲットエリアへ速やか・正確に電極面をセット
- 操作性が良くしっかり持てるミゾ形ハブ微調整も容易にできます



医療機器届出番号：223ADBZX00054000

ディスポーザブル筋電図用針電極 ニューロライン イノジェクト

筋電図測定・薬液注入が同時に行えます

同定した部位に対して針を抜かず
薬液注入が可能

シリコンコーティングの針で負担が少ない

標的穿刺部位の確認・同定がスムーズ




医療機器承認番号：22600BZX00048000

ディスポーザブル脳波 / 術中モニタリング用針電極 ニューロライン サブドーマル針電極

低インピーダンスでノイズのがりにくく
クリアな波形が得られます

強く柔軟性のあるステンレス製の針、
鋭い針先でスムーズな穿刺

識別しやすいカラーリード線、
用途に合わせ選べる線長・製品タイプ

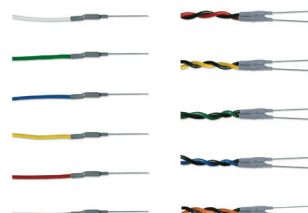

医療機器承認番号：226AFBZX00038000