

・・・新発想の進化した採尿具・・・

ハルンキット®

I 準 備

- ① バーコードラベルの貼付は
**外筒のストレート部が長く
貼り易い。**
- ② ハルンキットは
軽量・コンパクト
で、**安価**に郵送が
できます。

外径 約 19.5mm
重量 約 9g

郵送：安価

II 採 尿

- ① 広い採尿口で採尿が
容易です。
- ② **ネジ式で確実に
閉められます。
尿もれの不安がありません。**
- ③ 自宅採尿の際、ゴミが発生
しません。
- ④ チャック袋の併用で
万一の尿もれ
にも安心です。

採尿：簡単・清潔

尿もれ：ネジ設計で安心


III 検 査

- ① 採尿量は **6 ml** 採取できます。
- ② 口内径は **約13 mm** です。
スピッツ内の液高も
約7.2 mm 確保
でき、10項目の
尿試験紙の検査
も容易です。
- ③ **尿自動分析装置等機械検査が可能。**
- ④ **遠心分離⇒尿沈渣・鏡検ができます。**
(尿自動分析装置での検査後、
約5mlの検体が残る為
⇒遠心分離後0.1mlの
沈渣で鏡検できます。)
《注意》検体が少量ですので
実施にあたっての可否は
必ず施設でご判断ください。

尿沈渣⇒鏡検が可能

自動検査：機械に適合

- 尿自動分析装置
- 尿中成分分析装置
- 定量分析装置

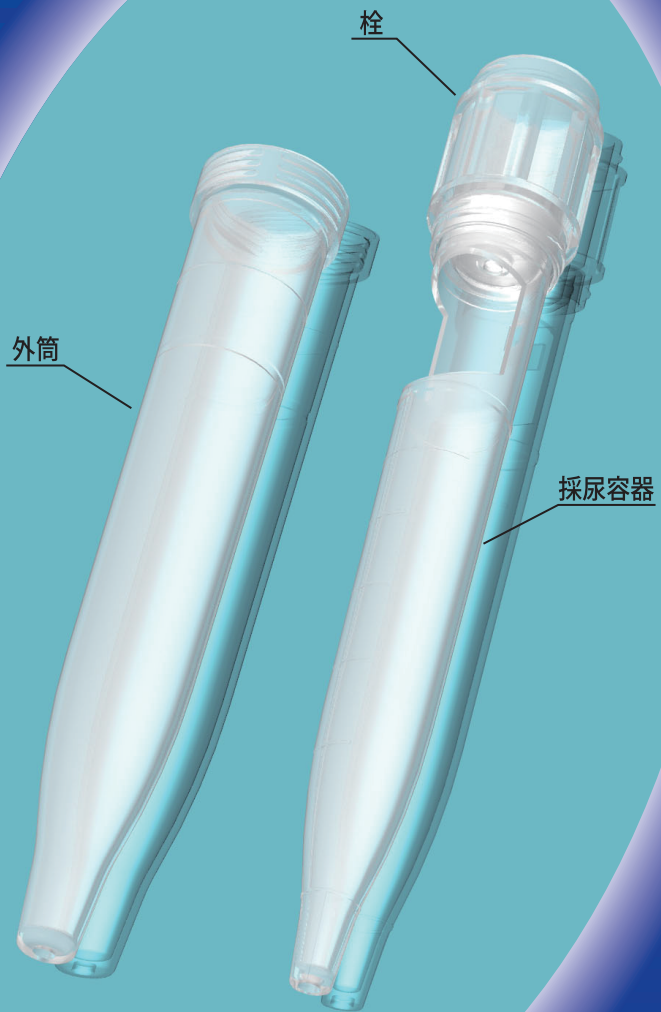

略実物大

ハルンキットS (半透明・PP製)

部品名	概寸 最大径×長さ(mm)
栓	19.5×28
採尿容器	14.5×104
外筒	19.5×106.5

※透明性及び耐圧強度を向上させた
製品もご用意しております。

使用上の注意

- ・採尿用途以外には使用しないでください。
- ・採尿後の容器を郵便、メール便等で送付する事は
しないでください。

採尿器の廃棄処理

- ・市町村の廃棄処理区分に従ってください。

製造発売元 旭電機化成株式会社

〒537-0003 大阪市東成区神路4丁目3番18号
TEL(06)6976-1371 FAX(06)6976-8940

特許申請中
® 商標登録